

UltraSafe

UltraSafe[®]
NEEDLE GUARDS

**Se usi queste
siringhe...**



**Proteggi gli infermieri
dalle punture degli aghi.
Usa le protezioni per
aghi UltraSafe[®].**



**Protezioni per
aghi UltraSafe**

Le protezioni per aghi UltraSafe si inseriscono agevolmente sulle siringhe in vetro preriempite impiegate per somministrare eparine a basso peso molecolare, vaccini o farmaci biotecnologici. Le protezioni per aghi UltraSafe—una protezione efficace. Basta chiamarci. Al resto ci pensiamo noi. Tel: +1.760.918.9908.

**Prendi sicurezza. Prendi
ultrasicurezza con i dispositivi
anti-puntura UltraSafe.**

Protezioni per aghi UltraSafe


- Protezioni identificate da diversi colori per agevolare la scelta della dimensione giusta.
- Una durissima plastica trasparente aiuta ad identificare il farmaco.
- Un “clic” udibile ed una conferma tattile segnalano l’inserimento della protezione.
- La consueta attivazione a scatto ed il facile montaggio agevolano la formazione ed il favore del personale.



Protezioni per aghi UltraSafe/Riferimenti farmaci


B50

da utilizzare solo con siringhe in vetro preriempite da 0,5 ml conformi agli standard dell'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione (ISO) e dotate di ago lungo fino a 16 mm (5/8").

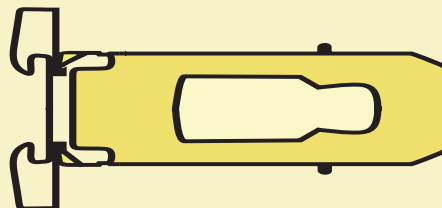


B100

da utilizzare solo con siringhe in vetro preriempite da 1,0 ml conformi agli standard dell'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione (ISO) e dotate di ago lungo fino a 16 mm (5/8").

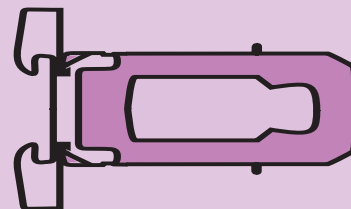


B100L

da utilizzare solo con siringhe in vetro preriempite da 1,0 ml (lunghe) conformi agli standard dell'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione (ISO) e dotate di ago lungo fino a 16 mm (5/8").

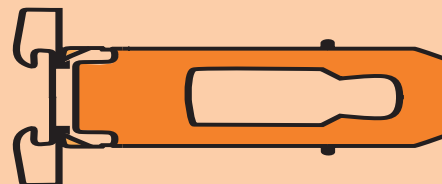


B150

da utilizzare solo con siringhe in vetro preriempite da 1,5 ml conformi agli standard dell'Organizzazione Internazionale di Standardizzazione (ISO) e dotate di ago lungo fino a 25 mm (1").

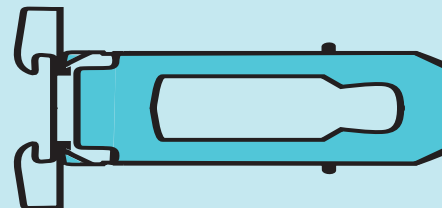


Istruzioni per l'uso

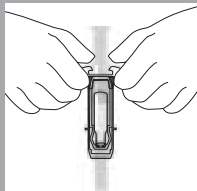


Inserimento a scatto.

Inserire la siringa nella protezione per ago fino a far scattare saldamente in posizione le alette per le dita. Durante il montaggio non spingere lo stantuffo.

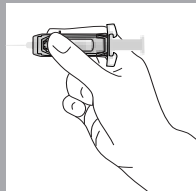

Somministrazione dell'iniezione.

Somministrare l'iniezione in base al protocollo standard.

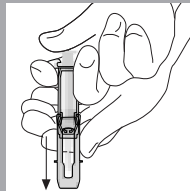

Inserimento della protezione di sicurezza sull'ago.

Dopo l'iniezione inserire la protezione di sicurezza sull'ago, utilizzando la mano libera. Il corretto inserimento è indicato da un “clic.”

Tenere sempre le mani dietro l'ago.

Smaltimento.

Gettare siringa e protezione ago in un contenitore per oggetti taglienti.

